Sani-Cloth® 360°: Opplæringsplakat

Plastfrie 2-i-1 rengjørings- og desinfeksjonsservietter


For ikke-invasivt medisinsk utstyr og harde, ikke-porøse overflater. Kan brukes til forhåndsrengjøring eller dekontaminering av medisinsk utstyr før sterilisering. Kun for profesjonell bruk.

MD


DESINFISERER PÅ 2 MINUTTER




Forberedelse

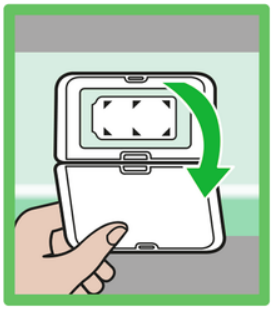

+ Åpne lokket.

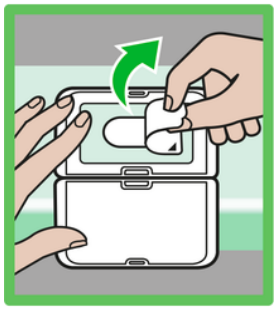

+ Fjern den avtakbare forseglingen.

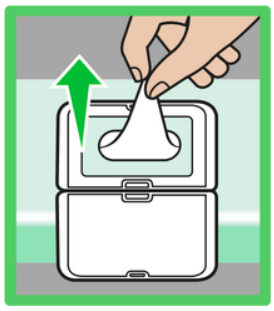

+ Trekk ut en serviett.

Rengjøring og desinfeksjon



+ Trekk ut en serviett og åpne den.
+ Tørk overflaten i en S-bevegelse fra toppen til bunnen.


Produktet er testet under skitne forhold, men ved kraftig tilsmussing eller synlig smuss anbefaler vi først å fjerne overflødig smuss med en serviett eller ren klut, og deretter bruke en ny serviett for å sikre optimal effekt.

Kontakttid



+ Sørg for at overflaten forblir synlig våt i den nødvendige kontakttiden (2 minutter).
+ Bruk en ekstra serviett ved behov.
+ La overflaten lufttørke.

Avfallshåndtering

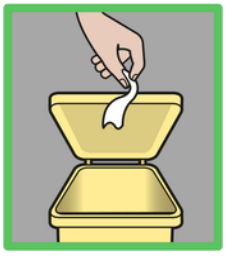

+ Kast servietten etter bruk for å hindre krysskontaminering.
+ Ikke gjenbruk servietter.
+ Kast innhold og beholder i samsvar med lokale forskrifter.
+ Resirkulerbar emballasje.

Annen informasjon:

+ *Dekning ca. 1 serviett per 2 m².*
+ *Må ikke brukes hvis servietten er tørr.*
+ *Kun for profesjonell bruk.*

IKKE SKYLL NED

IKKE I MAKERATOR

5 PP

PDI

Vil du vite mer? Kontakt Modul Nordic

post@modulnordic.no +47 62 54 71 10 modulnordic.no

Norsk versjon av 415 rev A 160626